

泰伯磨擦試驗機

TABER Rotary Abrasers 5135 | 5155

TABER

www.taberindustries.com

美國

天平衡器

電氣化學

黏度分析

色彩色差

攪拌均質

光學儀器

光學特性

恆溫設備

塗料檢測

物性試驗

紡織專區

紙業專區


加速耗損實驗標準設備

現今最方便的「加速耗損實驗」設備，用途廣泛。只要更換不同磨輪組件，即可進行不同性質的耗損實驗。

TABER 5155 具備雙樣本盤，能同時進行 2 組對照試驗，適合：紙張、紙板、布料、行李箱、地毯、玻璃、塑膠、金屬塗佈、磁磚、油漆、塗料、裝潢建材、地板材料、高壓薄板、紡織品、塑料、交通標線、陽極處理、蠟、標籤、牙科材料、汽車內裝、傢俱 等。



單磨輪5135型

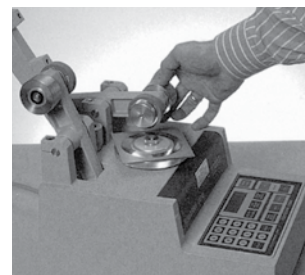

泰伯研磨輪特性

規格	型式	材質	荷重限制	研磨特性	保養需求
CS-10	S	橡膠及研磨顆粒	500...1000g	和緩	配合S-11型研磨頭修整片
CS-10F	S	橡膠及研磨顆粒	250...500g	非常和緩	配合S-11型研磨頭修整片
CS-17	S	橡膠及研磨顆粒	500...1000g	粗糙	配合S-11型研磨頭修整片
H-10	H	玻璃化材質	500...1000g	粗糙	配合250型磨輪修整器
H-18	H	玻璃化材質	500...1000g	中度粗糙	配合250型磨輪修整器
H-22	H	玻璃化材質	500...1000g	非常粗糙	配合250型磨輪修整器
H-38	H	玻璃化材質	250/500/1000g	非常細緻、硬質	配合250型磨輪修整器
CS-0, S-32	S	光滑橡膠	250/500/1000g	非常和緩	不需
S-42, S-33	S	砂紙帶	500...1000g	中度	不需，可直接更換
CS-5	S	羊毛氈	250...500g	無磨損	不需
S-35	H	碳化鎢	500...1000g	用作切割或削切	以溶劑與硬毛刷清洗
S-39	--	皮革	500...1000g	搭配155/255進砂機	空氣噴槍或吸塵器

* 型式：「S」代表「軟質磨輪」適合「硬質樣本」、「H」代表「硬質磨輪」適合「柔軟樣本」

標準配備	5135	5155
樣本測試盤	1組	2組
荷重砝碼(1000g)	2顆	4顆
荷重砝碼(500g)	2顆	4顆
吸空吸塵器組	1台(附吸管及毛刷頭)	1台(附吸管及毛刷頭)
研磨頭修整片(S-11)	1包	1包
樣本固定片(S-36)	1包	1包
軟質磨輪(CS-10)	1對	2對
硬質磨輪(H-18)	1對	2對
尺寸重量	11"x16"x10" 45 lbs.	20"x14"x10" 90 lbs.
電源供應	110/230V 50/60Hz	



由左至右：真空吸塵器、雙磨輪5155型、單磨輪5135型