

VISCO™

迴轉式黏度計


- 全鋁合金打造、超輕量
- 實驗室、現場、戶外皆適用
- 快速檢測，作業方便



全數位化螢幕，數字顯示讀值、圖形化操作界面，任何人皆可輕鬆使用！



測量主畫面

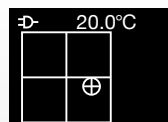

電子水平儀畫面

Measurement Items 黏度 (cP)
扭力 (%) 皆以數字顯示

Measurement Range

黏度 A1 50...200,000cP
A2 100...600,000cP
A3 500...2,000,000cP
扭力 0.0...100.0% (建議施測範圍 10.0...100.0%)

Specifications

Cat.No.	6820	精確度	黏度 ±1% (F.S.) 溫度 ±0.2°C
型號	VISCO-895	轉速範圍	0.5...250rpm
測量範圍	黏度 A1: 50...200,000cP A2: 100...600,000cP A3: 500...2,000,000cP (cP=mPa.s) 扭力 0.0...100.0% 建議施測範圍 10.0...100.0% 溫度 10.0...40.0°C	樣品	10...40°C
解析度	黏度 <10,000cP: 0.1cP >10,000cP: 1cP 扭力 0.1% 溫度 0.1°C	溫度範圍	10...40°C
		工作溫度	10...40°C
		輸出埠	USB
		電源供應	DC6V (AA 鹼性電池 1.5Vx4) AC100...240V 50/60Hz
		尺寸重量	120x120x221mm 895g 主機淨重 270g 腳架及螺絲

能測量不穩定的油類樣品！

可使用拋棄式紙杯，省卻清洗的麻煩

選購 Package A 包含一組容器轉接座，可搭配市售紙杯、塑膠杯，測量完畢即可拋棄，針對油類或難以清洗的樣品最合適！

VISCO-895 VISCO Package A Cat.No. 6830

VISCO-895 主機
紙杯轉接器 (包括 100 個杯子)* RE-78141
*50 個紙杯、50 個塑膠杯



紙杯轉接器

紙杯

塑膠杯

安裝範例

ULA(Ultra-low Adapter) 極低黏度套件

選購 Package B 可將 VISCO-895 原本的測量範圍，向下延伸至更低黏度範圍 (1...2,000cp)

VISCO Package B Cat.No. 6811
VISCO-895 VISCO Package B Cat.No. 6831

VISCO-895 主機
極低黏度套件* RE-77120
*可測量極低黏度範圍 1...2,000cP 之樣品



極低黏度套件

安裝範例

One Hand. One Touch. One Button. VISCO™

**設定
ONE TOUCH™**

VISCO 的設定非常容易、轉子的安裝只要一個動作——輕輕插入主機即可。完全無需複雜的安裝，任何人在幾分鐘內就能學會並順利操作。

**準備
ONE HAND™**

VISCO 的測量準工作只要用一隻手就能完成。將盛有樣本液的燒杯放入底座卡槽，再將主機及轉子放上底座即可，連高度都不用調整，一切就是這麼簡單！

**測量
ONE BUTTON™**

VISCO 操作完全透過一個飛梭旋鈕即可完成（可撥動及按壓），使用者不必耽心因為誤觸其它按鈕或碰到別的開關，而造成不必要的麻煩。

選購品

編號	說明	編號	說明
RE-79100	燒杯 (S)15ml	標準黏度液	
RE-79101	燒杯 (L)100ml	RE-89010	JS2.5 標準黏度液 (ULA) (NIPPON GREASE CO., LTD)
RE-78141	紙杯轉接器 含 50 個紙杯、50 個塑膠杯	RE-89011	JS5 標準黏度液
RE-79102	紙杯 (90ml, 100 個)	RE-89012	JS10 標準黏度液
RE-79103	塑膠杯 (90ml, 100 個)	RE-89013	JS20 標準黏度液
極低黏度套件 (ULA)		RE-89014	JS50 標準黏度液
RE-77120	極低黏度套件 (ULA) 測量筒、引導器、延長架、UL 專用底板 掛勾、掛勾固定器、UL 轉子	RE-89016	JS200 標準黏度液 (NIPPON GREASE CO., LTD)
RE-77107	UL 轉子 (掛勾、掛勾固定器)	RE-89017	JS500 標準黏度液
RE-77121	測量筒 (蓋子、O-ring)	RE-89018	JS1000 標準黏度液
轉子		RE-89019	JS2000 標準黏度液
RE-77104	轉子 (A1)	RE-89020	JS14000 標準黏度液
RE-77105	轉子 (A2)	RE-89021	JS52000 標準黏度液
RE-77106	轉子 (A3)	RE-89022	JS160000 標準黏度液
		溫度感測器	
		RE-75540	溫度感測器